



LIT MÉDICAL

Mode d'emploi

Qu'est-ce qu'un lit médical ?

- *Un lit médical possède un relèvement électrique qui vous permet d'obtenir une position semi-assise ainsi que toutes les positions intermédiaires.*
- *Vous pouvez aussi régler la hauteur du lit grâce à une fonction dédiée, également présente sur la télécommande.*
- *Ce type de lit dispose enfin d'un relèvement jambes (manuel) pour ajuster votre position et obtenir la configuration la plus confortable possible.*

Comment régler...

... LA HAUTEUR DU LIT ET DU RELÈVE-BUSTE ?

> À partir de la télécommande électrique, appuyez sur la touche correspondante jusqu'à l'obtention de la position désirée.

ATTENTION : après les soins, le lit doit toujours être remis en position de sécurité (= position basse).




RELÈVE-BUSTE
HAUTEUR DE LIT

... LE RELÈVE-JAMBES ?

Ce réglage se fait manuellement :

> **Soulevez** le relève-jambes par la poignée située à son extrémité ; les crémaillères se bloquent automatiquement.

> **Rabaissez** le relève-jambes en le soulevant légèrement, avant de le laisser descendre.

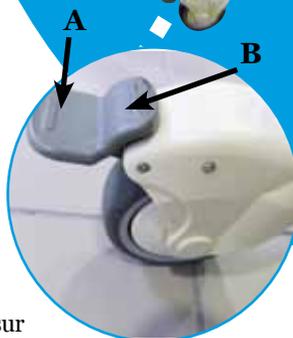

... LES ROULETTES BLOQUANTES ?

> **Immobilisez** le lit une fois en place, en enfonçant l'extrémité "A" des quatre pédales situées sur les roulettes.

> **Débloquez** les roulettes en appuyant sur les pédales de déverrouillage "B".



> Positionnez de préférence la télécommande en appui sur le panneau de tête du lit.



> Pour les télécommandes disposant de l'option verrouillage, passez la clef magnétique devant le symbole du cadenas ouvert pour déverrouiller la commande.



... LA BARRIÈRE PLIANTE ?

> **Relevez-la** en tirant sur la boule située sous la barrière puis en soulevant le tube supérieur jusqu'au verrouillage.

> **Baissez-la** en tirant sur cette même boule puis en appuyant sur le tube supérieur jusqu'à la position basse.



ATTENTION :

- Ne déverrouillez pas une barrière depuis l'intérieur du lit !
- Ne sortez pas du lit les barrières relevées !
- Surveillez les patients agités ou frêles, ils risquent de se trouver bloqués entre les barreaux, entre le matelas et la barrière, entre la tête du lit et la barrière...

BIEN UTILISER SON MATELAS GAUFRIER ANTI-ESCARRES

- > Placez les plots du matelas au contact du patient.
- > Ne borde pas l'alèse sur les côtés, ni les draps.



Consignes de sécurité et d'entretien

- Le lit doit être branché sur une prise dédiée. Dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, assurez-vous que ses caractéristiques soient adaptées à celles du lit (230 V, 10 A maxi et 50 Hz).
- **Avant tout déplacement du lit, débranchez la prise d'alimentation !** Ne tirez pas sur le câble-secteur mais sur la tête de prise en plastique. Pendant le déplacement, le câble ne doit pas être en contact avec le sol ou les roulettes.
- Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques (moteurs et télécommande) ni à faire de nœuds.
- **Vérifiez régulièrement l'état des câbles.** Si vous constatez la moindre altération ou si une intervention technique est nécessaire, contactez le service logistique : **05 59 50 31 10.**
- **Hors déplacement du lit, laissez les freins bloqués en permanence !**
- **Ne fumez pas dans le lit médical !**
- Nettoyez régulièrement les parties chromées et peintes à l'aide d'un chiffon doux. Éliminez en particulier les traces d'humidité.

EN CAS DE PANNE	
PROBLÈMES RENCONTRÉS	SOLUTIONS PROPOSÉES
Le relève-buste ne fonctionne pas...	1. Vérifiez l'alimentation électrique (prise murale, disjoncteur).
	2. Vérifiez le branchement de la télécommande.
	3. Vérifiez le branchement sur le moteur principal.
Le lit à hauteur variable ne monte pas ou ne descend pas...	1. Vérifiez l'alimentation électrique (prise murale, disjoncteur).
	2. Vérifiez le branchement de la télécommande.
	3. Vérifiez si les fils ne sont pas dénudés, pincés ou coincés.
Le repose-jambes ne descend pas ou ne tient pas...	1. Respectez le nombre de crans (5 ou 6 selon le modèle).
	2. Relevez à fond avant de le redescendre.

Si après ces vérifications le problème persiste, veuillez contacter notre service logistique : **05 59 50 31 10.**

Santé Service Bayonne et Région

Hospitalisation et soins infirmiers à domicile
Avenue de Plantoun – 64100 Bayonne
www.santeservicebayonne.com

